

## Verteo

### Seisomanostin – myös pitkille käyttäjille

Verteo on suunniteltu potilaille, joilla on vaikeuksia nousta itse ylös istuma-asennosta. Seisomanostin vaatii potilaalta jonkin verran jalkavoimaa.

Nostimen avulla potilas voidaan siirtää esim. pyörätuoliin tai wc-istuimelle. Käyttäjä nostetaan asteittain tai kokonaan pystyasentoon, ylävartalo tuettuna, molemmat jalat tukevalla alustalla ja sääret tyynyjä vasten. Verteo nostaa myös pitkän ihmisen pystyyn.


Verteo-nostinta voidaan käyttää sairaaloissa, hoitokodeissa ja kotiloissa.



**Säärituki**  
säädettyä;  
tukee potilaan  
jalcoja sääriiluun  
alueella.



**Tukeva nostoliinan  
kiinnitys**  
nostovarressa on  
4 tappia helppoa  
kiinnitystä varten.

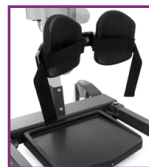

**Vakaa  
jalkatuki**  
ja jalka-  
remmit



Sähköinen  
jalustan levitys



230 kg max.  
nostokyky



**Polvituki**  
tukee potilasta ja hänen  
jalcojaan nostettaessa  
puoliseisovaan asentoon



**Istuin** kääntyy ylöspäin,  
jotta potilas pysyy  
tukevasti oikeassa  
asennossa.



**Lukittavat takapyörät**  
estävät tahattoman  
liikkeen esim. potilaan  
istuesssa.



**Poljin** säätelee jalasten leveyttä  
helposti, mikä yhdessä matalan  
pohjan kanssa mahdollistaa  
pyörätuoleihin ja sänkyihin  
pääsyn vaivattomasti.



Mekaaninen jalustan  
jalkojen levitys



180 kg max.  
nostokyky

## VertiHelp

### Siirtolaite on kuin kääntölevy ja seisomanostin yhdessä



















VertiHelp on kompakti siirtolaite, joka on ihanteellinen ihmisille, joilla on vaikeuksia kävellä, mutta jotka voivat istua ja seistä tuettuna.

Sen avulla voidaan siirtää potilas istuma-asennosta toiseen. VertiHelp vaatii käyttäjältä hieman käsi- ja jalkavoimaa.

Pieni kääntösäde tekee siitä ihanteellisen myös pienempiin tiloihin. Sähköviritteettömänä laitteena yksinkertaistaa päivittäisiä siirtoja.

Käytetään päivittäisessä potilaiden hoidossa hoitokodeissa, sairaaloissa ja kotona.

## Tärkeimpien teknisten tietojen vertailu

Tekniset tiedot:	Verteo	VertiHelp
 Jalustan jalkojen levitys:	sähköinen	mekaaninen
 Max. kuorma [kg]:	230	180
 Pituus [cm]:	108	128
 Leveys [cm]:	75	62
 Korkeus [cm]:	113	101,5
 Nostoalue [cm]:	78 – 174	-
 Säärituki (asennettu alaspäin) korkeus (min./max.) [cm]:	39 / 52	-
 Säärituki (asennettu ylöspäin) korkeus (min./max.) [cm]:	53 / 66	-
 Polvituen korkeus [cm]:	-	64
 Min. jalustan leveys (sis/ulko) [cm]:	51 / 66	49,3 / 61,1
 Max. jalustan leveys (sis/ulko) [cm]:	101 / 115	91,8 / 103,6
 Jalkojen korkeus [cm]:	11,5	8,4
 Pyörien halkaisija (ilman lukkoa / lukon kanssa) [cm]:	10 / 12,5	7,5 / 10
 Paino [kg]:	60	35,5
 Akun kapasiteetti [Ah]:	2,9	-
 Min. kääntösäde [cm]:	62	~55
 Laturi (integroitu ohjauslaatikkoon) [V/Hz]:	100 – 240 / 50 / 60	-
 Käsisäätimen toiminnot	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ylös / alas</li> <li>•sähköinen jalustan levitys</li> <li>•akun varauksen taso</li> <li>•huoltotarpeen ilmoitusvalo</li> <li>•ylikuormituksen ilmoitusvalo</li> </ul>	-

Valmistaja: Meden-Inmed Sp. z o.o.

